




Mit elegantem Design und einer langlebigen Konstruktion, ist die MUW 300L Ultraschall Gesundheits- und Fitness-Waage ideal für Berechnungen von Größe, Gewicht und Body-Mass-Index (BMI) in Arztpraxen, Krankenhäusern und Fitnessstudios. Die MUW erleichtert die Datenerhebung von Patienten durch Eliminierung des manuellen Prozesses, der oft zu ungenauen Ergebnissen führt. Einfach zu bedienen, lässt die Waage den Benutzer Größe und Gewicht schnell und genau messen, ohne jeglichen physischen Kontakt mit dem Patienten. Die MUW 300L verfügt über eine langlebige, gusseiserne Basis und Aluminiumsäule, während die Gummifüße Sicherheit und Stabilität gewährleisten. Ein hell hinterleuchtetes LCD zeigt Größe, Gewicht und BMI auf einem Bildschirm an, dadurch entfällt die Notwendigkeit durch Lesewerte blättern zu müssen. Der Batteriebetrieb und die Räder machen die Waage einfach zu bedienen und beliebig bewegbar an jeden Ort, wo ein Patient gewogen werden muss.

Elegante Waage mit Ultraschallsensor - Gewicht, BMI, Körpergröße in einem Schritt

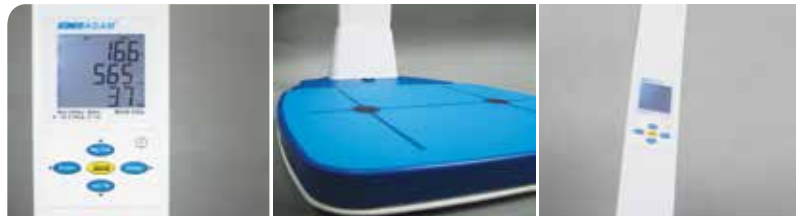

Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Besondere Höchstlast 300kg mit 50g Ablesbarkeit zum Wiegen schwergewichtiger Patienten
- Nur für nicht-eichfähige Anwendungen
- Rutschfeste Standfläche für sicheres Auf- und Absteigen
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Handgriffe und integrierte Räder für einfaches Manövrieren
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- BMI-Funktion und -anzeige
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- AC-Adapter inklusive
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

Anwendungen

- Wägung
- BMI-Funktion und -anzeige
- Messen der Körpergröße

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	MUW 300L
Kapazität	300kg
Ablesbarkeit	0.05kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.05kg
Linearität (+/-)	0.1kg
Größe Wägeplatte	375x375mm
Wä geeinheiten	kg, lb, lb:oz
Stabilisierungszeit (sec)	2
Schnittstelle	RS-232
Body-Mass-Index (BMI)	Ja
Höhe-Stab	Ja
Kalibrierung	Extern
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 17mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku
Betriebstemperatur	0° bis 40°C
Gehäuse	Stahlkonstruktion
Gesamtabmessungen	375x600x2320mm (BxTxH)
Nettogewicht	21.7kg

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3014011014	RS-232 Kabel
3074010507.....	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
700660290	Adam Kalibrierschein

Nützliches Zubehör

ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.

Bestellen