




Avec son design élégant et sa construction robuste, la balance ultrasonique de santé et de fitness MUW 300L est idéale pour les calculs de poids, de taille et d'indice de masse corporelle dans les cabinets de docteurs, les hôpitaux et les salles de sport. La MUW simplifie la collecte de données des patients en éliminant le processus manuel, qui mène souvent à des résultats inexacts. Facile à utiliser, la balance laisse les utilisateurs mesurer la taille et le poids rapidement et exactement sans aucun contact physique avec le patient. La MUW 300L a une base robuste en fonte et une colonne en aluminium, tandis que les pieds en caoutchouc fournissent la sécurité et la stabilité. Un écran LCD brillamment rétroéclairé affiche la taille, le poids et l'IMC sur un seul écran, éliminant le besoin de faire défiler les résultats. Une alimentation par batterie et des roues rendent la balance facile à utiliser et à déplacer n'importe où ou la pesée des patients est requise.

Balance ultrasonique élégante calcule facilement la taille, le poids et l'IMC

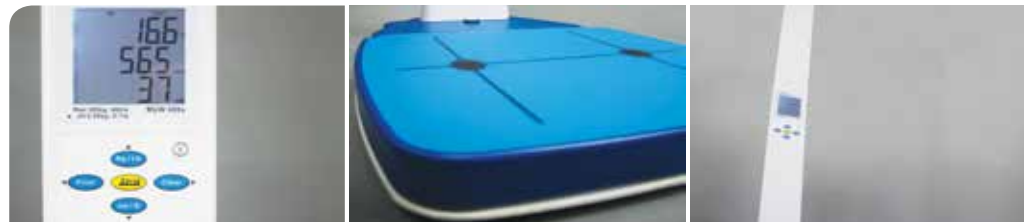

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- La plate-forme antidérapante garantit sécurité lorsque l'on monte et descend de la balance
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- IMC (indice de masse corporelle) fonction disponible sur la MDW 300L
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

Application

- Pesage
- IMC (indice de masse corporelle) fonction disponible sur la MDW 300L
- Mesure de la Taille

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Balance de Santé et de Fitness **MUW**

Modèle	MUW 300L
Capacité	660lb / 300kg
Précision	0.1lb / 0.05kg
Reproductibilité (S.D)	0.1lb / 0.05kg
Linéarité (+/-)	0.2lb / 0.1kg
Taille du plateau	14.8"x14.8" / 375x375mm
Unités de pesage	kg, lb, lb:oz
Temps de stabilisation (sec)	2
Interface	RS-232
Indice de masse corporelle (BMI)	Oui
Toise	Oui
Calibrage	Calibrage externe
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 0.7" / 17mm de haut
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
Température d'utilisation	0° à 40°C
Boîtier	Base en acier doux
Dim. totale	14.8"x23.6"x91.3" / 375x600x2320mm (lxpxh)
Poids net	47.8lb / 21.7kg

Accessoires

Numéro d'article Description

3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
3014011014	Câble RS-232 vers PC
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
700660290	Certificat de Calibrage

Accessoires Principaux



Imprimante Thermique ATP

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspond à une imprimante thermique vraiment polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.

Fourni par